

Obstetriske produkter

Kvalitetsprodukter fra Rocket Medical

Engangs amnioskop med lys

For hurtig og effektiv visualisering ved blodprøvetagning fra fosterets skalp under fødsel. Kraftig lyskilde der gør det nemt at indsamle dråben i kapillærrøret.




Ref	Product	Packaging
16000	amnioscope med obturator 142x33 mm, med Amnilume lys	10/box
16001	amnioscope med obturator 142x33 mm	10/box
16002	amnioscope med obturator 200x33 mm	10/box
16003	amnioscope uden obturator 200x23 mm, med Amnilume lys	10/box
16004	Amniolumen disposable light	10 units

Amniotomi krog

Til brug for perforering af fosterhinden. Findes i to udgaver, henholdsvis lige og bøjet udgave.

Ref	Product	Packaging
16120	Amniotomy Hook, curved	100 units
16121	Surgi-Hook, straight	100 units

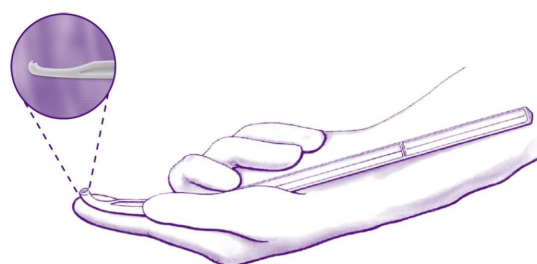

Pudendus blokade nål

Til sikker og nem anlæggelse af Pudendusblokade. inkl. Luer lock for øget sikkerhed.

Ref	Produkt	Packaging
16130	Pudendal block needle 20G x 130 mm	20 units



FBS Prøvetagnings stav

Skalpel, holder og heparinrør "alt i én stav".
Læg snittet, træk kniven tilbage ind i skaftet, og tag skalpblodprøven i én hurtig og simpel arbejdsgang.
Sterile enkeltpakkede med 5 heparinrør.

Ref	Product	Packaging
16010	FBS Sampling Wand, 55 µl capillaries	10 units
16011	FBS Sampling Wand, 75 µl capillaries	10 units
16012	FBS Sampling Wand, 85 µl capillaries	10 units
16013	FBS Sampling Wand, 100 µl capillaries	10 units

FBS Skalp skalpel

Steril 2,2 mm vinklet engangs skalp scalpel. er der brug for at lave flere snit kan bladene udskiftes og tilkøbes separat. Enkeltpakkede i æsker af 10 og 100 stk.

Ref	Product	Packaging
16020	FBS bladeholder w/ scw blade	10 units
16021	FBS blades scw	100 units

Heparin rør

Sterile hepariniserede plastik kapillærrør med propper.
Pakket i æsker af 10 x 5 stk.

Ref	Product	Packaging
16030	Heparinized capillaries, 55 µm	50 units
16031	Heparinized capillaries, 85 µm	50 units
16032	Heparinized capillaries, 100 µm	50 units


Copeland Skalp elektrode

Hurtig og sikker at påsætte uden brug af applikator for føtal hjertelyds detektering.

Rillet fingergreb letter placeringen af elektroden, som kan indføres allerede ved 1,5 cm. udvidelse. Elektrodens 3-punktsfæste sikrer fremragende kurvekvalitet, og hvis korrekt påsat kan elektroden ikke frigøres ved et uheld.

Automatisk kontrol af nålens indtrængningsdybde, og elektroden er let at afmontere og re-positionere.

Ref	Product	Packaging
16100	Copeland Scalp electrode, twin wire	25 units
16101	Copeland Scalp electrode, quick connector	25 units
16102	Copeland Scalp electrode, for Philips Avalon FM30 & FM50 systems	25 units

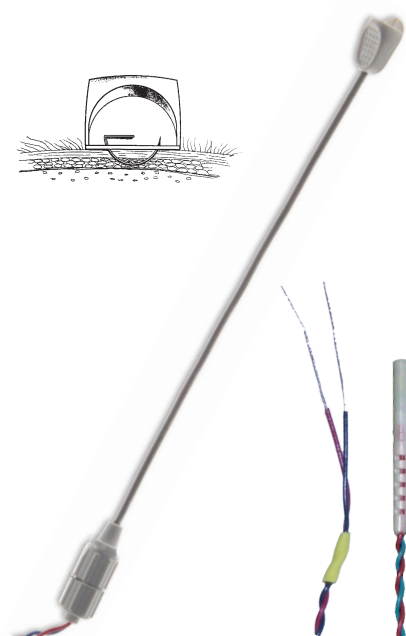

FBS Kit basic

“Alt i én kasse” hvor alle de remedier du skal bruge til en skalp blodprøve er samlet. Det hele ligger klar så tabet af værdifulde sekunder minimeres.

Kassen er sammensat så du kan foretage op til 5 skalp blodprøver i løbet af fødslen.



Indhold:

- 1 stk. amnioskop med lyskilde og obturator
- 5 stk ekkogene gaze servietter
- 1 stk engangs Ramply pincet
- 1 stk steril parafin tube
- 6 stk vatpinde på 30 cm
- 1 stk FBS skalp scalpel med 2 sæt blade
- 1 stk heparinrør holder
- 5 stk heparinrør og 10 propper

Ref	Product	Packaging
16040	FBS Kit w/ 5 capillaries 55 um	10 units
16041	FBS Kit w/ 5 capillaries 85 um	10 units
16042	FBS Kit w/ 5 capillaries 100 um	10 units
16043	FBS Kit w/ 5 capillaries 170 um	10 units

FBS Kit med FBS Prøvetagnings stav

“Alt i én kasse” hvor alle de remedier du skal bruge til en skalp blodprøve er samlet. Det hele ligger klar så tabet af værdifulde sekunder minimeres.

Kassen indeholder FBS Prøvetagnings staven og er sammensat så du nemt kan foretage op til 5 skalp blodprøver i løbet af fødslen.



Indhold:

- 1 stk. amnioskop med lyskilde og obturator
- 5 stk ekkogene gaze servietter
- 1 stk engangs Ramply pincet
- 1 stk steril parafin tube
- 6 stk vatpinde på 30 cm
- 1 stk FBS Prøvetagnings stav
- 1 stk heparinrør holder (for anden blodprøve)
- 5 stk heparinrør og 10 propper

Ref	Product	Packaging
16050	FBS Kit SW w/ 5 capillaries 55 um	10 units
16051	FBS Kit SW w/ 5 capillaries 85 um	10 units
16052	FBS Kit SW w/ 5 capillaries 100 um	10 units

Kompatibilitets skema

Product	Anbefalet volume	FBS Kit Basic	FBS Kit med FBS prøvetagnings stav
Radiometer ABL 70, 77 & 90 series	> 65 ul	16041	16051
Radiometer ABL 800 Flex w/ Flexmode selected	> 35 ul	16040, & 16041	16050
Radiometer ABL 700 series w/ tube volume selected	> 35 ul	16040	16050
Instrumentation Laboratory GEM 3000 series	170 ul	16043	NA
Instrumentation Laboratory GEM 4000 series	65 ul	16041	16051
ROCHE cobas b 121, 221, 123 systems	>40 ul >70 ul	16040 16041	16050 16051
Simens (Bayer) Rapidlar Series	100 ul	16042	16052